

PREVELLE™

Soft. Gentle. Precise.

For moderate to fine lines in areas of thin skin:

Prevelle features a soft, compliant HA particle formula that injects smoothly and precisely to treat a variety of facial wrinkles, fine lines, folds and scars.



The versatile HA filler with a low adverse event profile.



～ 「プリベール」のヒアルロン酸ジェルの特徴 ～

PREVELLE™

通常ヒアルロン酸注入剤は、液体状の非架橋ヒアルロン酸、それとは異なるゲル状の架橋ヒアルロン酸で構成されています。皮膚に注入した際に凹部を持ち上げる作用があるのは、架橋されたゲル状のヒアルロン酸だけです。一方、非架橋ヒアルロン酸は多くの場合、注入（針からの押し出し）を容易にするための潤滑剤として添加されています。この非架橋ヒアルロン酸は注入後 2、3 日で吸収されてしまう欠点があります。例えば、代表的な製品 A の場合、全体のおよそ 25% が非架橋ヒアルロン酸ですが、「プリベール」はヒアルロン酸全体に含まれる非架橋ヒアルロン酸の比率を約 2% にまで下げています。これにより 98% 架橋ヒアルロン酸による効果的な治療が期待出来ます。

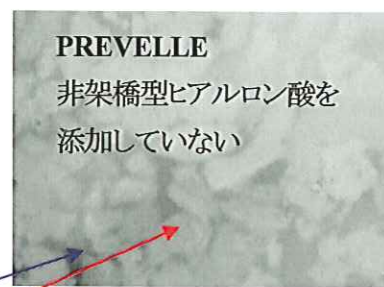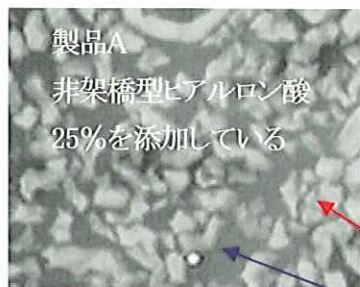

非架橋ヒアルロン酸 (黒い部分)

架橋ヒアルロン酸のゲル(粒子) (白い部分)

ヒアルロン酸粒子 拡大写真による比較

PREVELLE™

Hyaluronic Acid Dermal Filler

PREVELLE プリベール (米国 FDA 認可 ヨーロッパ CE マーク取得)

- 「プリベール」は、細かい皺に適したヒアルロン酸注入剤です。
- 注入後の赤み、腫れ、内出血などが最小限に抑えられるよう、独自のヒアルロン酸粒子サイズの組み合わせによって精製されています。
- 水和性(ハイドレーション)が高く、注入後の腫れが少ないため、注入直後の膨らみがほとんどそのまま施術後の仕上がりになります。そのため注入後の仕上がりを予想することが容易です。
- 「プリベール」のヒアルロン酸ジェルは柔らかく注入がスムーズですので、その他の注入剤で腫れや内出血などが起きやすかった皮膚の薄い部分やデリケートな部分、隆起や凹凸が出来やすい部分に適しています。

PREVELLE™



Catalogue No.	Description
801-1003	PREVELLE Dermal Filler

Each Package of PREVELLE Contains:

- 1 - 0.75 ml PREVELLE Dermal Filler Injectable Hyaluronic Acid Gel
- 2 - 30 G x 1/2 Needles

Each ml of PREVELLE Contains:

Hyaluronan Gel	5.5 mg
Sodium Chloride	9.5 mg
Water for Injection USP	q/s